



INDICAZIONI DI AVVERTENZA INDICAZIONE SOVRACCARICO

La bilancia è sovraccarica. La capacità massima di peso è indicata sulla scala. Scendere dalla bilancia per evitare danni.



BASSA INDICAZIONE DELLA BATTERIA

La batteria è scarica. Installa una nuova batteria.



RE-TEST

Visualizza "L" quando sali sulla bilancia, significa che questa lettura del peso è errata. Si prega di ripetere il test.



CONSIGLI PER L'USO E LA CURA

1. La superficie in vetro può risultare scivolosa quando è bagnata. Mantenetela asciutta!
2. Conservare la bilancia in luogo fresco con asciutto.
3. Rimanere fermi durante la pesatura. NON colpire, scuotere o far cadere la bilancia.
4. Trattare la bilancia con cura poiché è uno strumento di precisione.
5. Tenere sempre la bilancia in posizione orizzontale.
6. Pulire la bilancia con un panno umido ed evitare che l'acqua penetri all'interno della bilancia. Non utilizzare detergenti chimici / abrasivi.
7. Se la bilancia non si accende controllare se le batterie sono installate e se sono cariche. Inserire o sostituire delle nuove batterie.
8. Se compare un errore sul display o se la bilancia non si spegne per lungo tempo: togliere le batterie per 3 secondi e poi rimetterle per rimuovere il blocco.
9. Non utilizzare per scopi commerciali/professionali.

BILANCIA PESAPERSONA ELETTRONICA

MODEL: XDCAM7010P
 MAX 180 Kg - Div. 50 g
 BATTERIE: 4x1,5V AAA
 MADE IN CHINA
 FABBRICANTE: DML S.p.A.
 Via Emilia Levante 30/a
 48018 Faenza (RA) ITALY



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Fabbricante: DML S.p.A. - Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy - www.xd-enjoy.com



enjoy
your upgrade

BILANCIA PESAPERSONA ELETTRONICA




Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro

ISTRUZIONI PER L'USO | XDCAM7010P



SOSTITUIRE LA BATTERIA

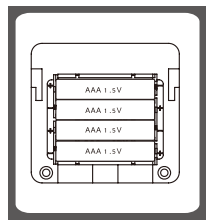

Per questa bilancia occorrono 4 batterie da 1,5V AAA (escluse).


Se si desidera sostituire le batterie:

- aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore della bilancia;
- estrarre le batterie usate;
- installare una nuova batteria posizionando un lato della batteria, quindi premendo verso il basso sull'altro lato.

Per favore prestare attenzione alla polarità.

LED DISPLAY

zona di visualizzazione della lettura del peso

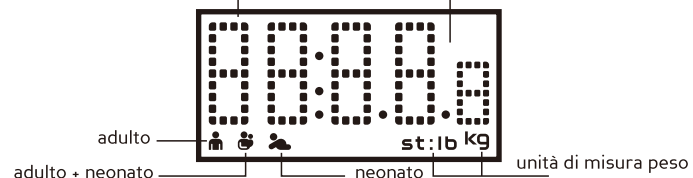

Questa icona ricorda che l'adulto dovrebbe salire sulla bilancia e ciò che il LED mostra è il peso per l'adulto.




Ricorda che l'adulto dovrebbe salire sulla bilancia con un neonato.



Ricorda che ciò che il LED mostra è il peso del neonato.

NOTA: le tre icone sopra saranno disponibili solo in modalità neonato.

PER INSTALLARE O CAMBIARE LA BATTERIA

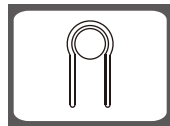


Quando la bilancia è accesa:

1. Premere a lungo per passare dalla modalità adulto alla modalità neonato
2. Premere brevemente per convertire l'unità di peso tra KG / LB / ST


NOTA: il sistema di unità di scala dipende dalla destinazione delle vendite o dalle esigenze del distributore.

FUNZIONAMENTO

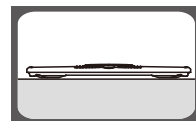

Passaggio 1:

Per essere certi della precisione, posizionare la bilancia su un pavimento duro e piatto evitando tappeti e moquette.

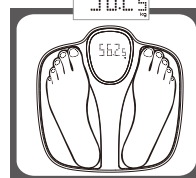

Passaggio 2:


Salire gentilmente sulla bilancia, dopodiché la bilancia si accenderà automaticamente. Rimanere fermi in posizione centrale e aspettare finché il peso sullo schermo non apparirà in maniera stabile.

MODALITÀ NEONATO: pesare rispettivamente adulto e neonato



Passaggio 1:


Per garantire la precisione, posizionare la bilancia su un pavimento duro e piano. Evitare tappeti o superfici morbide.

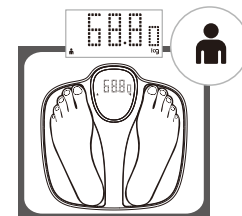

Passaggio 2:

Salire sulla bilancia delicatamente, la bilancia si accenderà automaticamente.


Attendere che il LED mostri la lettura del peso. Una volta che la lettura è stabile, il LED mostrerà Zero, quindi l'icona "Adulto + Neonato" lampeggerà (come mostrato nell'immagine)

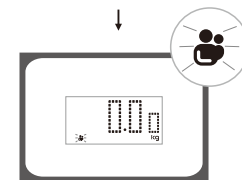

Passaggio 3:

Scendere dalla bilancia e risalire con il neonato.

Attendere fino a quando il LED mostra il peso del bambino.

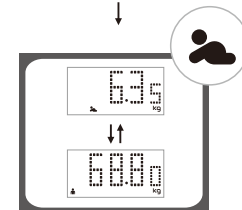

Il LED mostrerà il peso dell'adulto e del neonato rispettivamente per tre volte.

NOTA: la bilancia si spegne automaticamente entro pochi secondi se non viene eseguita alcuna operazione.